

Kundeninformation

Methodenupdate für NANOCOLOR® UV/VIS II und VIS II

Übersicht

Photometer	NANOCOLOR® UV/VIS II und VIS II
Methodensatznummer	r1382
Verfügbarkeit	ab 10.09.2026
Preis	kostenlos
Benötigtes Zubehör	USB-Stick





Hinweise

Wir empfehlen, vor jedem Update eine Sicherung der Daten über das -Icon in den entsprechenden Menü durchzuführen, auch wenn das Update die Daten nicht beeinflusst. Des Weiteren raten wir dazu, von Zeit zu Zeit ein Backup des Gerätespeichers durchzuführen. Zur Sicherung von kundeneigenen Sondermethoden empfehlen wir den Export auf ein externes Speichermedium, z.B. einen USB-Stick. Eine nähere Beschreibung zur Datensicherung entnehmen Sie dem Handbuch des Gerätes.



Modifizierungen

- Optimierung der Methode 0-10 Vicinale Diketone auf dem NANOCOLOR® UV/VIS II



Updatevorgang

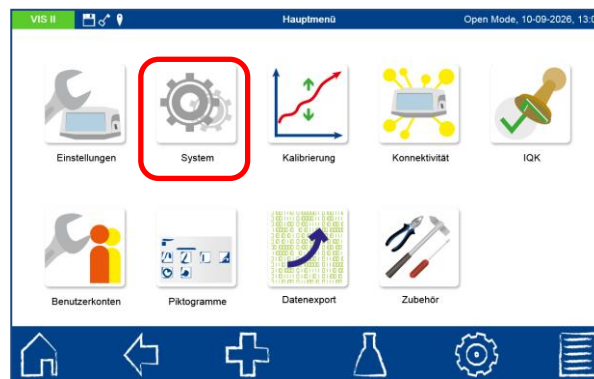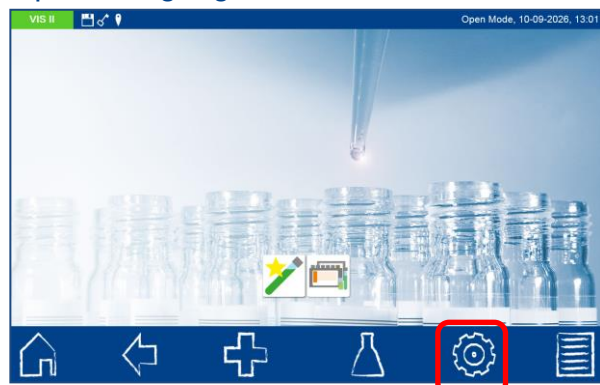

- Kopieren Sie die Methodenupdate-Datei auf die oberste Ebene eines USB-Sticks und verbinden Sie den USB-Stick mit einem der USB-A-Anschlüsse des Photometers. Navigieren Sie anschließend über das Hauptmenü zum Menüpunkt „System“.

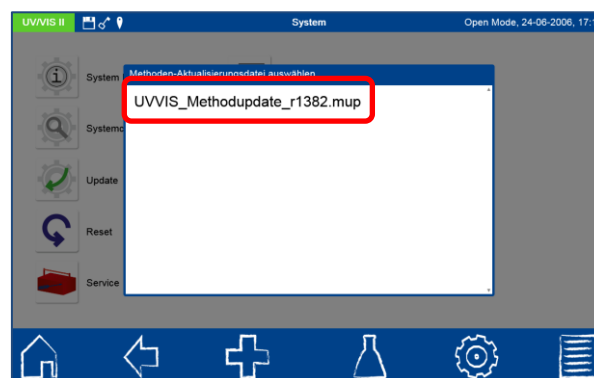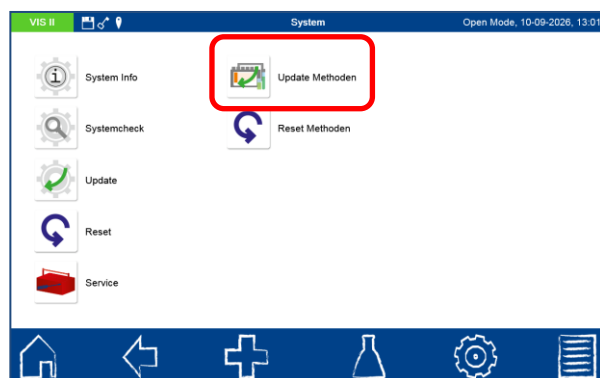

- Öffnen Sie den Menüpunkt „Methoden-Update“ und wählen Sie die gewünschte Methodenupdate-Datei (Dateiendung .mup) aus

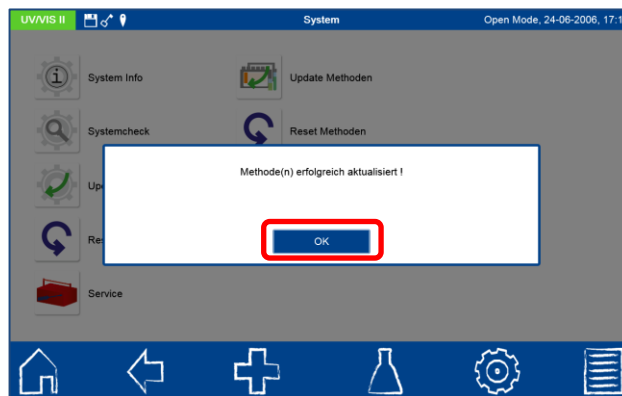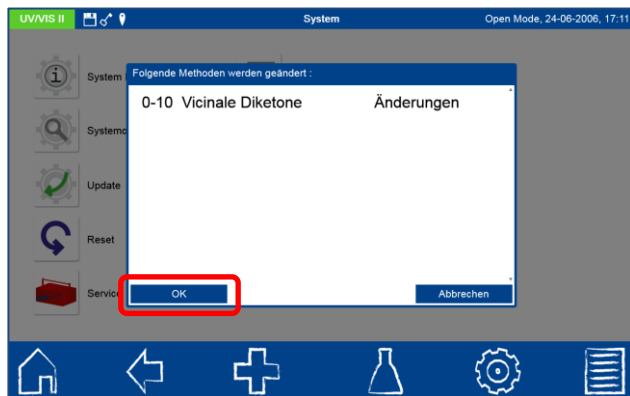

- Auf dem folgenden Bildschirm werden alle Methoden angezeigt, die durch das Update verändert oder hinzugefügt werden. Bestätigen Sie mit „OK“, um das Update durchzuführen, oder brechen Sie den Vorgang über „Abbrechen“ ab.
- Nach erfolgreichem Abschluss des Updates, das einige Minuten dauern kann, bestätigen Sie die Meldung mit „OK“

Kontakt

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Technischer Support und Kundenberatung

Tel.: +49 24 21 969-333
E-Mail: support@mn-net.com

Bestellannahme (national)

Tel.: 0800 2616 000
E-Mail: sales-de@mn-net.com