

Kundeninformation

Rev. 0

QUANTOFIX® Relax Reinigungsanleitung

Einleitung

Dank der Messgeometrie des QUANTOFIX® Relax entsteht während der Messung kein direkter Kontakt zwischen Teststreifen und Detektor. Verschmutzungen können dem Gerät auf Dauer trotzdem schaden. Bei der Messung in Milchprodukten oder anderen Lebensmitteln können unhygienische Rückstände auf dem Träger zurückbleiben.

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie man das QUANTOFIX® Relax schnell und einfach im Laboralltag sauber hält.

Anleitung

1. Gerät ausschalten

Schalten Sie das Gerät aus, ohne den Teststreifenhalter händisch einzuschieben.




2. Teststreifenträger entfernen

Entfernen Sie den Teststreifenträger vom Schlitten, indem Sie ihn nach vorne abziehen. Der Vorgang kann gerade zu Beginn etwas Kraft erfordern.



3. Teststreifenträger reinigen

Reinigen Sie den Kunststoffträger mit warmem Seifenwasser oder Ethanol. Eine Reinigung in der Spülmaschine ist ebenfalls möglich.

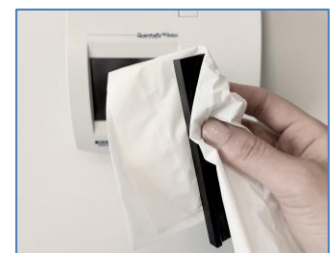

4. Teststreifenträger installieren

Teststreifenträger auf den Schlitten schieben, bis er vollständig im Gehäuse verschwindet. Der Vorgang kann gerade zu Beginn etwas Kraft erfordern.



5. Gerät einschalten

Schalten Sie das Gerät ein und der Schlitten fährt wie gewohnt in seine Arbeitsposition. Die Aussparungen im Teststreifenträger und im Schlitten sollten sich bündig übereinander befinden, sodass der darunterliegende Sensor frei liegt.



Videoanleitung

Sehen Sie sich die Schritt-für-Schritt-Anleitung im Video an:



Kontakt

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Technischer Support und Kundenberatung	Tel.:	+49 24 21 969-333
	E-Mail:	support@mn-net.com
Bestellannahme (national)	Tel.:	0800 2616 000
	E-Mail:	sales@mn-net.com