

Beknopte referentiegids

Belangrijke informatie:

Deze afzonderlijke beknopte referentiegids wordt geleverd bij het URYXXON® Relax-instrument. De referentiegids is niet bedoeld als een allesomvattende handleiding. Raadpleeg de volledige handleiding van het instrument voor aanvullende informatie, waaronder uitvoerige procedures voor gebruik, reinigen en desinfecteren.

MACHEREY-NAGEL teststrips op het URYXXON® Relax instrument

De URYXXON® Relax is een reflectiefotometer voor de analyse van urineteststrips. Het instrument is bedoeld voor gebruik bij in-vitrodiagnostiek (IVD) en mag alleen worden gebruikt door medische professionals. Bespreek elk positief resultaat met uw arts. Herhaal de meting als de symptomen aanhouden.

Gebruik alleen urineteststrips van MACHEREY-NAGEL die geschikt zijn voor instrumentbeoordeling.

Test verse urinemonsters binnen 2 uur na afname. Laat gekoelde urinemonsters eerst op kamertemperatuur (15–30 °C) komen voordat u ze test.

Lees eerst deze gids voordat u een test uitvoert.

Volg zorgvuldig de instructies.



Stap 1:


Zorg dat het analyse-apparaat is aangesloten. Zet het analyse-apparaat op AAN. Zorg dat de striphouder schoon is.



Stap 2:

Dompel de strip in het urinemonster. Zorg dat alle testvlakken nat worden.

Verwijder de teststrip na 1 seconde uit de urine. Trek de lange kant van de strip langs de zijkant van de houder om overtollige urine te verwijderen.

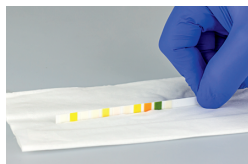


Stap 3:

Raak de lange rand van de strip kortstondig (ongeveer 1 sec) aan met een absorberend papieren doekje om overtollig monster te verwijderen.




Zorg dat u het teveel aan urine van de teststrip verwijdert om te voorkomen dat het in het instrument terechtkomt.

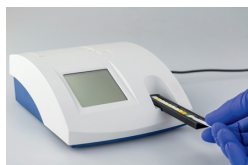

Stap 4:

Plaats de teststrip op de striphouder. Zorg ervoor dat de testvlakken naar boven gericht zijn. Duw de strip naar het uiteinde van de striphouder.

Hierdoor zal het instrument automatisch beginnen met meten.

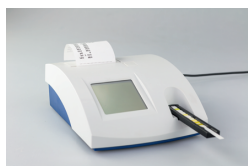

Stap 5:

Wanneer de meting voltooid is, zal het resultaat worden afgedrukt.



Stap 6:

Gooi gebruikte teststrips weg bij het laboratoriumafval. Veeg alle urineresten van de striphouder.

Reinigen



1. Veeg het instrument aan de buitenkant af met een desinfectiedoekje.
2. Schakel het instrument uit en trek de striphouder uit het instrument.
3. Veeg de striphouder schoon met een desinfectiedoekje. Plaats de houder daarna in het instrument.
4. Duw voldoende hard om de striphouder volledig op de metalen strip te duwen.
5. Reinig het oppervlak van het instrument eenmaal per dag met een desinfectiedoekje. Gebruik speciale desinfectiedoekjes.

Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over reiniging en onderhoud.

Kwaliteitscontrole

Elke faciliteit moet zijn eigen beleid voor kwaliteitscontrole invoeren.

De werking van de teststrips moet worden bevestigd door positieve en negatieve controleoplossingen te gebruiken. Positieve en negatieve controles moeten eenmaal per dag worden geanalyseerd, telkens wanneer een nieuwe fles met strips wordt geopend, telkens wanneer een nieuwe partij strips wordt gestart en elke 30 dagen om de bewaarcondities te controleren.

Printpapier vervangen



1. Open de printerkap door op het daarvoor bedoelde gedeelte achter de papieropening van de printer te drukken. Verwijder de oude papierrol.
2. Plaats een nieuwe papierrol, waarbij de rol vanaf de onderkant afrolt.
3. Rol ongeveer 10 cm aan papier af.
4. Sluit de printerkap.



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Technische service

Als u na het lezen van de handleiding nog vragen hebt of technische hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
 Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Duitsland
 Tel: +49 24 21 969-0
 e-mail: info@mn-net.com
 www.mn-net.com