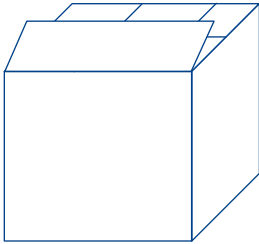
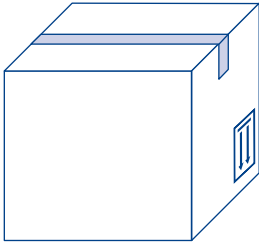
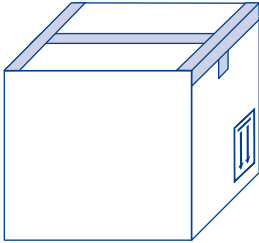



# Slutligt omhändertagande


Information om användning av avfallskartonger


- 

När ni har fått avfallskartongerna ska dessa tas isär och sättas ihop igen i fraktduglig form. De långa lock- och bottenidorna bildar den övre avslutningen och ska vikas om först.
- 

Tejpa först ihop botten med glasfiberförstärkt tejp (75 mm). Tejpen kan beställas från MACHEREY-NAGEL (REF 916 20). En tejrulle har 50 m tejp.
- 

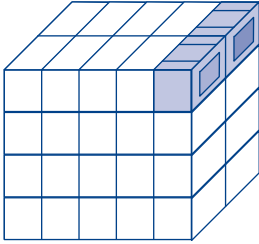Obs! De påtryckta pilarna ska peka nedåt när kartongbotten tejpas ihop. Då garanteras att kyvetterna står upprätt under transporten. För ökad säkerhet ska lådorna tejpas igen med H-mönster (se fig. 3). Innan du fortsätter med nästa arbetssteg ska kartongen vändas.
- 

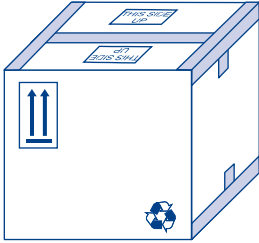Lådorna av PS-skum från MACHEREY-NAGEL (otejpade) ska sedan staplas i avfallskartongen enligt skissen. Se till att kartongerna fylls fullständigt med reagensförpackningar.
- 

När kartongerna har fyllts fullständigt ska de förslutas med glasfiberförstärkt tejp. Även här ska kartongen tejpas ihop med ett H-mönster på ovan- och undersidan. Texten „THIS SIDE UP“ anger att det rör sig om det övre locket.
- 

Ta bort gamla etiketter, se till att de blir oläsliga eller tejpa över dem. Avfallskartongen (låda av papp enligt ADR) förses till slut med texten „Begränsade mängder“ och en adressetikett från MN.

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

**MACHEREY-NAGEL**



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG  
Valenciennes Str. 11  
52355 Düren · Deutschland

DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com  
CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com  
FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com  
US Tel.: +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com



A0xxxxx / sv02 / 071x