

MACHEREY-NAGEL

pH-Fix und
QUANTOFIX®



Einfach eintauchen und ablesen

- Teststreifen für pH und mehr
- Benutzerfreundliche Handhabung
- Exzellente Präzision in Studien bestätigt**, ***

** Bitte beachten Sie unsere Vergleichsstudien unter <https://www.mn-net.com/media/pdf/pH-Fix-Studie.pdf>

*** Bitte beachten Sie unsere Vergleichsstudien unter https://www.mn-net.com/media/pdf/Study_QUANTOFIX_Peroxide_DE.pdf

pH-Fix – für präzise pH-Bestimmung

Patentierte Technologie verhindert Kontamination

Der Indikator ist kovalent an die Testfelder gebunden und blutet nicht in die Probe aus.

Daher können die Teststreifen für unbestimmte Zeit in der Probe verbleiben, ohne diese zu verunreinigen.



Längere Teststreifen als bei der Konkurrenz

Der lange, hydrophobe Kunststoffgriff schützt den Benutzer vor gefährlichen oder aggressiven Proben und ermöglicht pH-Tests in engen und tiefen Gefäßen.

Der lange Teststreifen erweist sich als großer Vorteil in der Benutzerfreundlichkeit im Vergleich zu anderen Produkten.



Breites Anwendungsspektrum

Einfacher pH-Check - immer und überall

Anwender weltweit schätzen die pH-Fix Teststreifen. Sie sind die Standardmethode zur einfachen und wirtschaftlichen pH-Bestimmung in der Aquakultur, Landwirtschaft, Metallverarbeitung, Lebensmittelindustrie, Produktion und vielen mehr.



Bestellinformation

pH-Fix Produkte	REF
Klassische Flachdose mit 100 Teststreifen, 6 x 85 mm	
■ pH-Fix 0 – 14	92110
■ pH-Fix 0,0 – 6,0	92115
■ pH-Fix 2,0 – 9,0	92118
■ pH-Fix 4,5 – 10,0	92120
■ pH-Fix 6,0 – 10,0	92122
■ pH-Fix 7,0 – 14,0	92125
■ pH-Fix 0,3 – 2,3	92180
■ pH-Fix 1,7 – 3,8	92190
■ pH-Fix 3,1 – 8,3	92135
■ pH-Fix 3,6 – 6,1	92130
■ pH-Fix 4,0 – 7,0	92137
■ pH-Fix 5,1 – 7,2	92140
■ pH-Fix 6,0 – 7,7	92150
■ pH-Fix 7,5 – 9,5	92160
■ pH-Fix 7,9 – 9,8	92170
PlopTop Dose mit 100 Teststreifen, 6 x 85 mm	
■ pH-Fix 0 – 14 PT	92111
■ pH-Fix 3.6 – 6.1 PT	92131
■ pH-Fix 4.5 – 10.0 PT ¹⁾	92121



¹⁾ CE-gekennzeichnet für die pH-Bestimmung von Magensaft


pH-Fix und QUANTOFIX® – ein verlässliches Duo



Exzellente Präzision in Studien bestätigt

50 Jahre Erfahrung in der Fertigung von Teststreifen zählen sich aus! pH-Fix 0–14 und QUANTOFIX® Peroxid 100 Teststreifen von MACHEREY-NAGEL stehen dem Wettbewerbsprodukt (MQuant®* von Merck*, Art 109535 / 110081) in nichts nach, wie Vergleichsstudien zeigen. Genauigkeiten von bis zu 96 % unterstreichen die Zuverlässigkeit der Messergebnisse von pH-Fix 0–14 und QUANTOFIX® Peroxid 100!

Vertrauen Sie in unsere Erfahrung und Qualitätsstandards!

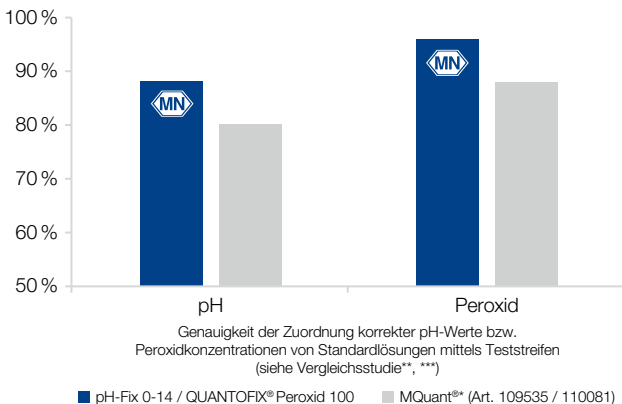

Vergleichsstudie pH-Fix 0–14

Sehen Sie sich die Vergleichsstudie an und überzeugen Sie sich selbst von pH-Fix!

* Merck und MQuant® sind eingetragene Marken der Firma Merck KGaA Darmstadt, Deutschland. MACHEREY-NAGEL wird weder unterstützt, noch von der Firma Merck gesponsert oder ist mit ihr verbunden.

** Bitte beachten Sie unsere Vergleichsstudien unter <https://www.mn-net.com/media/pdf/pH-Fix-Studie.pdf>



Vergleichsstudie QUANTOFIX® Peroxid

Sehen Sie sich die Vergleichsstudie an und überzeugen Sie sich selbst von QUANTOFIX®!

*** Bitte beachten Sie unsere Vergleichsstudien unter https://www.mn-net.com/media/pdf/Study_QUANTOFIX_Peroxide_DE.pdf



QUANTOFIX® – Parameter von A-Z

Schnell und einfach direkt vor Ort

Auch unerfahrene Anwender schätzen die QUANTOFIX® Teststreifen für sofortige und zuverlässige Ergebnisse, wo immer sie sie brauchen. QUANTOFIX® Teststreifen sind sofort einsatzbereit und erfordern kein weiteres Zubehör. Entdecken Sie die umfangreiche Vielfalt der QUANTOFIX® Parameter!

Bestellinformation

QUANTOFIX® Produkte	Messbereich	REF
■ Ammonium	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 200 · 400 mg/L NH ₄ ⁺	91315
■ Ascorbinsäure	0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 500 · 700 · 1000 · 2000 mg/L Vitamin C	91314
■ Chlorid	0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 · ≥ 3000 mg/L Cl ⁻	91321
■ Chlor Sensitive	0 · 0,1 · 0,5 · 1 · 3 · 10 mg/L Cl ₂	91339
■ Freie Fettsäuren	0 · 0,25 · 0,5 · 1 · 2 · 3 %	91365
■ Molybdän	0 · 5 · 20 · 50 · 100 · 250 mg/L Mo ⁶⁺	91325
■ Nitrat 100	0 · 5 · 10 · 25 · 50 · 75 · 100 mg/L NO ₃ ⁻ , 0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 · 25 · 50 mg/L NO ₂ ⁻	91351
■ Nitrat 250	0 · 5 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 mg/L NO ₃ ⁻	91366
■ Nitrat / Nitrit	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 mg/L NO ₃ ⁻ , 0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/L NO ₂ ⁻	91313
■ Nitrit	0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/L NO ₂ ⁻	91311
■ Peressigsäure 50	0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 mg/L Peressigsäure	91340
■ Peressigsäure 500	0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 400 · 500 mg/L Peressigsäure	91341
■ Peressigsäure 2000	0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 mg/L Peressigsäure	91342
■ Peroxid 25	0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H ₂ O ₂	91319
■ Peroxid 100	0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/L H ₂ O ₂	91312
■ Peroxid 1000	0 · 50 · 150 · 300 · 500 · 800 · 1000 mg/L H ₂ O ₂	91333
■ Phosphat	0 · 3 · 10 · 25 · 50 · 100 mg/L PO ₄ ³⁻	91320
■ Sulfat	200 · 400 · 800 · 1200 · 1600 mg/L SO ₄ ²⁻	91329
■ Sulfid	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L SO ₃ ²⁻	91306
■ Zink	0 · 2 · 5 · 10 · 25 · 50 · 100 mg/L Zn ²⁺	91310

Finden Sie alle
QUANTOFIX®
Produkte auf
unserer Webseite!



Jetzt ganz einfach umstellen

MACHEREY-NAGEL – Zuverlässigkeit „made in Germany“

- 50 Jahre Erfahrung in der Fertigung von Teststreifen
- verlässlich in Verfügbarkeit und Präzision
- eintauchen – ablesen – fertig: Ergebnis in wenigen Sekunden

Probieren Sie unseren StripFinder!

Ihr einfacher Umstieg auf zuverlässige Teststreifen von MACHEREY-NAGEL – mit dem StripFinder!



StripFinder

Ihr einfacher Umstieg auf zuverlässige Teststreifen von MACHEREY-NAGEL!

Hersteller

-- bitte auswählen --

Artikelnummer

Suche

Jetzt den StripFinder ausprobieren!

Visuell oder automatisiert – für maximale Flexibilität

pH-Fix und QUANTOFIX® können Sie nicht nur visuell mit der Farbskala auswerten, sondern auch bequem mit unserem Reflektometer QUANTOFIX® Relax messen – ganz nach Ihrem Zeitplan und Bedürfnissen. Die Automatisierung beugt subjektiver Farbwahrnehmung vor und erlaubt quantitative Analysen, die digital dokumentiert werden.



Mehr Infos zum QUANTOFIX® Relax!

Neugierig geworden?

Hier kostenloses Muster anfragen!

Überzeugen Sie sich selbst von der MACHEREY-NAGEL Qualität. Beantragen Sie Ihr kostenloses Muster über unsere Musteranfrage



Ihr Händler vor Ort:



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valenciener Straße 11 · 52355 Düren · Deutschland
Tel.: +49 24 21 969-0 · E-mail: info@mn-net.com

© v. poth · Tijana · sinitar · Czanner – stock.adobe.com
KATDE100265 pH-Fix QUANTOFIX de1a

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

