

Validation data / Methodenvalidierungsdaten


Rev 03/06.2023

Determined in accordance to German standard DIN 38 402 - A51, DIN 32645 and DIN ISO 5725

Ermittelt in Anlehnung an DIN 38 402 - A51, DIN 32645 und DIN ISO 5725

Test	NANOCOLOR® easily liberated cyanide 04
REF	985025
Measuring range / Messbereich	0,01 - 0,40 mg/L CN ⁻
Photometer	Reference/ Referenz
Wavelength / Wellenlänge	605 nm
Cuvette / Küvette	14 mm ID
Standard material / Standardsubstanz	Dipotassium tetracyano zincate

Specified data for procedure / Verfahrenskennndaten		
Number of lots / Anzahl Chargen	6	
Slope / Steigung ^[1]	0,28	(Target value / Sollwert 0,287 ± 0,014)
Ordinate segment in A / Ordinatenabschnitt in E ^[1]	0,009	
Reagent blank in A / Reagenzienblindwert in E	0,016	
Limit of detection / Nachweisgrenze ^[2]	0,0004	mg/L CN ⁻
Limit of determination / Bestimmungsgrenze ^[2]	0,001	mg/L CN ⁻
Sensitivity Absorbance 0.010 A / Empfindlichkeit Extinktion 0,010 E ^[1]	0,003	mg/L CN ⁻
Standard deviation of the method / Verfahrensstandardabweichung ^[1]	0,01	mg/L CN ⁻
Variation coefficient of the method / Verfahrensvariationskoeffizient ^[1]	2,72	%
Confidence interval / Vertrauensbereich ^[1]	0,01	mg/L CN ⁻
Precision of a measurement value / Präzision eines Messwerts ^[3]	0,003	mg/L CN ⁻
Correctness of a measurement value / Richtigkeit eines Messwerts ^[3]	0,006	mg/L CN ⁻
Accuracy of a measurement value / Genauigkeit eines Messwerts ^[3]	0,01	mg/L CN ⁻

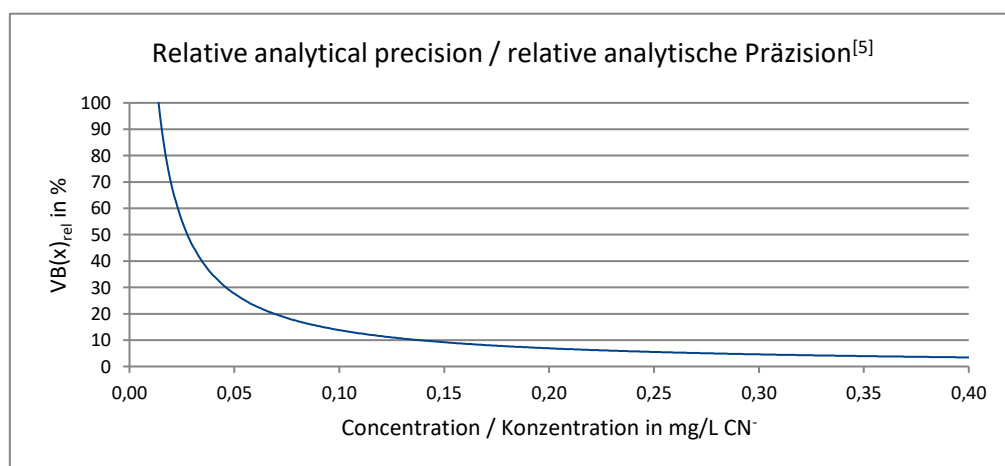

This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Literature / Literaturangabe

1. DIN 38402 A51, "Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser und Schlammuntersuchung - Allgemeine Angaben (Gruppe A) - Teil 51: Kalibrierung von Analyseverfahren - Lineare Kalibrierfunktion (A51)" (2017).
"German standard methods for the examination of water, waste water and sludge - general information (group A) - Part 51: Calibration of analytical methods - linear calibration (A51)" (2017).
2. DIN 32645, "Chemische Analytik - Nachweis-, Erfassungs- und Bestimmungsgrenze unter Wiederholbedingungen - Begriffe, Verfahren, Auswertung" (2008).
"Chemical analysis - Decision limit, detection limit and determination limit under repeatability conditions - Terms, methods, evaluation" (2008).
3. DIN ISO 5725-1, "Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Meßverfahren und Messergebnissen - Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Begriffe" (1997).
"Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 1: General principles and definitions" (1997).
4. Kromidas, Stavros: Handbuch der Validierung in der Analytik Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2011(2).
5. Funk, Werner / Dammann, Vera / Donnevert, Gerhild: Qualitätssicherung in der Analytischen Chemie Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2005(2).