

Validation data / Methodenvalidierungsdaten


Rev 02/06.2023

Determined in accordance to German standard DIN 38 402 - A51, DIN 32645 and DIN ISO 5725

Ermittelt in Anlehnung an DIN 38 402 - A51, DIN 32645 und DIN ISO 5725

Test	NANOCOLOR® Ammonium 10
REF	985004
Measuring range / Messbereich	0,20 - 8,00 mg/L NH ₄ -N
Photometer	Reference/ Referenz
Wavelength / Wellenlänge	690 nm
Cuvette / Küvette	14mm ID
Standard material / Standardsubstanz	Ammonium chloride

Specified data for procedure / Verfahrenskenndaten		
Number of lots / Anzahl Chargen	74	
Slope / Steigung ^[1]	5,5	(Target value / Sollwert 5,5 ± 0,28)
Ordinate segment in A / Ordinatenabschnitt in E ^[1]	0,02	
Reagent blank in A / Reagenzienblindwert in E	0,02	
Limit of detection / Nachweisgrenze ^[2]	0,03	mg/L NH ₄ -N
Limit of determination / Bestimmungsgrenze ^[2]	0,09	mg/L NH ₄ -N
Sensitivity Absorbance 0.010 A / Empfindlichkeit Extinktion 0,010 E ^[1]	0,10	mg/L NH ₄ -N
Standard deviation of the method / Verfahrensstandardabweichung ^[1]	± 0,06	mg/L NH ₄ -N
Variation coefficient of the method / Verfahrensvariationskoeffizient ^[1]	± 1,47	%
Confidence interval / Vertrauensbereich ^[1]	± 0,14	mg/L NH ₄ -N
Precision of a measurement value / Präzision eines Messwerts ^[3]	± 0,03	mg/L NH ₄ -N
Correctness of a measurement value / Richtigkeit eines Messwerts ^[3]	± 0,09	mg/L NH ₄ -N
Accuracy of a measurement value / Genauigkeit eines Messwerts ^[3]	± 0,12	mg/L NH ₄ -N

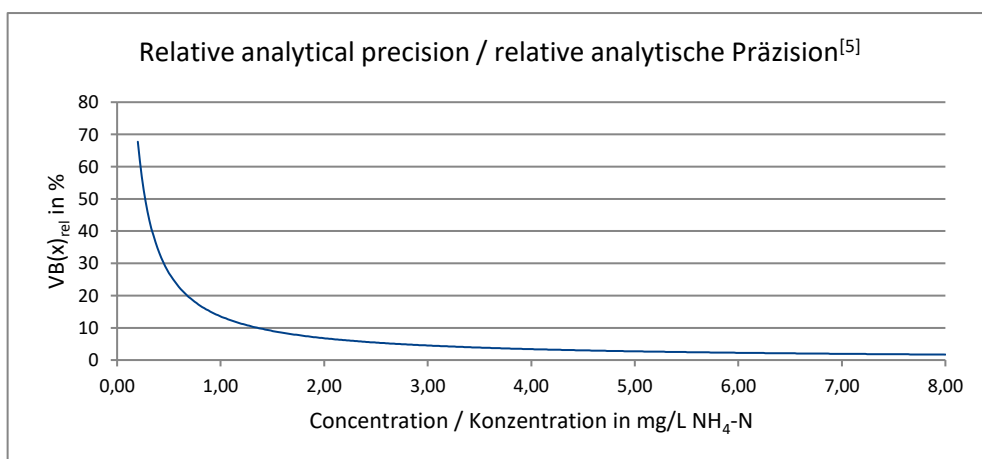

This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Literature / Literaturangabe

1. DIN 38402 A51, "Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser und Schlammuntersuchung - Allgemeine Angaben (Gruppe A) - Teil 51: Kalibrierung von Analyseverfahren - Lineare Kalibrierfunktion (A51)" (2017).
"German standard methods for the examination of water, waste water and sludge - general information (group A) - Part 51: Calibration of analytical methods - linear calibration (A51)" (2017).
2. DIN 32645, " Chemische Analytik - Nachweis-, Erfassungs- und Bestimmungsgrenze unter Wiederholbedingungen - Begriffe, Verfahren, Auswertung" (2008).
"Chemical analysis - Decision limit, detection limit and determination limit under repeatability conditions - Terms, methods, evaluation" (2008).
3. DIN ISO 5725-1, "Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Meßverfahren und Messergebnissen - Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Begriffe" (1997).
"Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 1: General principles and definitions" (1997).
4. Kromidas, Stavros: Handbuch der Validierung in der Analytik Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2011(2).
5. Funk, Werner / Dammann, Vera / Donnevert, Gerhild: Qualitätssicherung in der Analytischen Chemie Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2005(2).